



## Oximetro da dito con diversi parametri: SPO2, PR, PI



- Display LCD a due colori di facile lettura
- Indicatore di batteria scarica
- Particolarmente indicato alle persone con: problemi di salute, broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattie, asma bronchiale.
- Adatto per gli sport in alta quota (es. alpinismo, sci e sport aerei)

### INDICATORE PI:


L'indice di perfusione riflette la quantità di flusso sanguigno misurata dall'ossimetro. Un professionista sanitario verifica il flusso sanguigno per identificare i cambiamenti della condizione di salute del paziente.

### FUNZIONE SVEGLIA:

Impostazione della sveglia e del segnale acustico in base alle proprie esigenze. Il segnale acustico si attiverà ogni volta che la misurazione supera i valori impostati.

### DISPLAY LCD:

Display multidirezionale ruotabile in 4 direzioni. Sei modalità consentono di visualizzare i risultati in qualsiasi direzione.

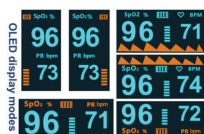

## SPECIFICHE:

SpO2	<p>Campo di misurazione: 70~99%</p> <p>Risoluzione: <math>\pm 1\%</math></p> <p>Precisione: <math>\pm 2\%</math> (70%~99%), non specificato (&lt;70%)</p>
Pulsazioni:	<p>Campo di misurazione: 30~240 bpm</p> <p>Risoluzione: <math>\pm 1\%</math></p> <p>Precisione: <math>\pm 2\text{bpm}</math> o <math>\pm 2\%</math></p> <p>Bassa perfusione: <math>\leq 0.4\%</math></p>
Potenza:	<p>1.5V (AAA size)</p> <p>2 Batterie alcaline</p> <p>Tensione di alimentazione: 2.6~3.6V</p>
Corrente:	$\leq 30\text{mA}$
Spegnimento automatico:	Si spegne automaticamente in mancanza del segnale per più di 8 sec.
Dimensioni e peso del prodotto:	60 (L) x 30 (W) x 30 (H) 128.9 g

Codice prodotto: **C101A2**  
Codice Paraf : **X7XM6R 981388503**  
Codice EAN: **7640173131083**